


Bischoff & Bischoff


Mode d'emploi

Tobago



Enjoy mobility.

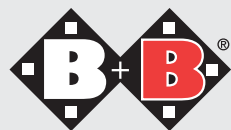

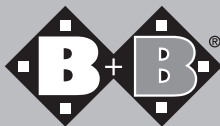

Chaise de douche « Tobago » (pliable, avec dossier)

Chère cliente, cher client,

L'aide pour la douche B+B que vous venez d'acheter est un produit allemand haut de gamme qui facilitera les soins à domicile.

La présente notice d'utilisation vous permettra de mieux vous familiariser avec la manipulation de votre aide de douche B+B et d'acquiescer ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre nouveau produit vous apportera entière satisfaction !

1. Déclaration de conformité

B+B déclare en sa qualité de fabricant du produit que la chaise de douche « Tobago » est entièrement conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.

2. Données relatives à l'utilisation du produit

La chaise de douche « Tobago » est conçue exclusivement pour s'asseoir sous la douche.

3. Usage conforme – Indications

Démarche/Maintien instable en cas de réduction/absence fonctionnelle des extrémités inférieures (exemple : perte de force due à une affection maligne, à des maladies cardio-vasculaires et pulmonaires avancées, chroniques) avec maintien diminué du tronc.

4. Attention - Consignes de sécurité

-

Analyse des risques conforme à la norme DIN EN ISO 14971

- Pour vous asseoir et vous lever, faites-vous aider par une tierce personne
- Poids max. autorisé 120 kg
- Réglez les 4 pieds de la chaise à la même hauteur
- Vérifiez la solidité des boutons d'arrêt • Attention lors de la fixation de l'assise sur le cadre : risque de pincement.
- Assise uniquement prévue pour s'asseoir.

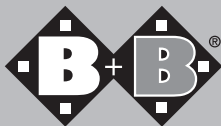


Fig. 1

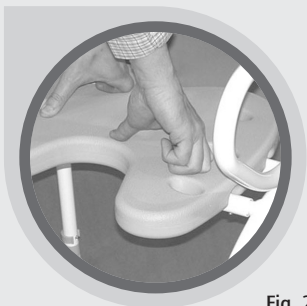


Fig. 2

5. Assemblage et montage

Basculez les deux cadres latéraux vers l'avant. Rabattez le cadre de siège du haut vers le bas sur la surface d'appui du cadre latéral.

Fixez le cadre de siège et le cadre latéral en insérant les deux goupilles de blocage dans les orifices prévus (voir fig. 1).

Pour une assise correcte, les accoudoirs fixes et l'évidement doivent être dirigés vers l'avant !

Pour enclencher le siège dans le cadre, enfoncez-le fortement (voir fig. 2).

Insérez les 4 pieds dans le tube du cadre et réglez-les à la hauteur souhaitée à l'aide de la goupille d'arrêt (voir point 7).

Pour enlever le siège, tenez-le au niveau du cadre latéral et retirez-le du cadre.

6. Montage du dossier

Le dossier est monté sur l'élément latéral du cadre correspondant (voir fig. 3) et fixé avec les embouts de fixation dans les ouvertures prévues du cadre et du dossier (voir fig. 4).

7. Réglage de la hauteur d'assise

La hauteur des pieds peut être réglée sur 5 positions (plage de réglage : 8 cm).

Retirez le clip de fixation situé sur les 4 pieds.

Tirez le tube intérieur pour le régler sur la position souhaitée, tout en veillant à ce que les orifices des tubes intérieur et extérieur soient face à face.

Insérez à nouveau le clip de fixation dans l'orifice. Veillez à ce que le clip adhère parfaitement au tube (voir fig. 5). Le clip de fixation est placé correctement lorsque vous ne pouvez plus faire tourner le tube intérieur.

Les quatre pieds doivent être réglés à la même hauteur !

8. Nettoyage et désinfection de la chaise de douche

La chaise de douche Tobago peut être réutilisée si elle est nettoyée et désinfectée avec des produits courants.



Fig. 3

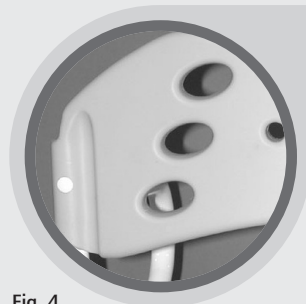


Fig. 4

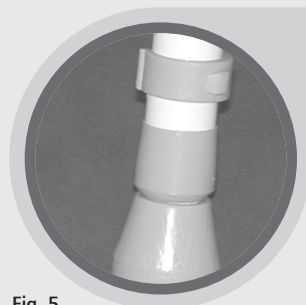


Fig. 5


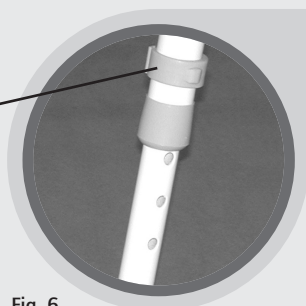


Fig. 6

clip de fixation

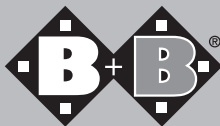

9. Caractéristiques techniques

- Poids max. autorisé 120 kg.
- I/P/H (en mm) : 570 / 520 / 880-955
- Poids : 4,8 kg.
- Hauteur d'assise : 460-540 mm 5 positions avec clip
- Largeur/Profondeur de l'assise : 450/400 mm
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 125 °C
- Couleur : bleu ou blanc
- Cadre : en aluminium
- Assise et dossier : en plastique (PE-HD)

10. Outils de réglage/réparation

1 clé plate de 10 mm

1 clé hexagonale coudée n° 6

11. Identification du produit

Une étiquette d'identification avec la désignation du produit, le numéro de série, le poids maximal de l'utilisateur et l'adresse de la société est collée sur le cadre du produit.

12. Garantie

La garantie s'applique uniquement si les conditions d'utilisation et d'usage prévu du produit sont respectées.

Tout renvoi du produit doit se faire dans l'emballage d'origine.

13. Livraison du modèle de série

1/1x cadre latéral gauche/droite

1x cadre de siège

1x assise B+B (plastique)

1x dossier B+B (plastique)

4x tubes télescopiques

4x goupilles de sécurité

1x jeu de vis

2x rivets aveugles (plastique blanc)

Coupon de garantie

(Veuillez tenir compte de nos conditions générales de vente)

Produit : chaise de douche Tobago

Numéro de série :*

(à remplir par le revendeur)

Revendeur :

Date et cachet

* Les références se trouvent sur les côtés du châssis.

B+B France S.A.R.L.

2 rue Hélène Boucher • Parc Ariane - Immeuble Saturne • F-78280 Guyancourt

Tél.: +33 0800/79 90 79 90 • Fax: +33 (0)1 61 38 35 89

www.b-bfrance.fr

contact@b-bfrance.fr

constructeur: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 700/6000 7070 • Fax: +49 700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

